


ODBĚR MOČE NA DETEKCI UROGENITÁLNÍCH PATOGENŮ METODOU PCR

vyšetření metodou PCR pomáhá k zachycení urogenitálních patogenů v moči

POKYNY PRO PACIENTA

1. před odběrem moče jednu hodinu nemočte
2. do nádobky zachyťte počáteční proud moče
3. moč napipetujte do speciální odběrové zkumavky *cobas PCR Media*, viz obr.:

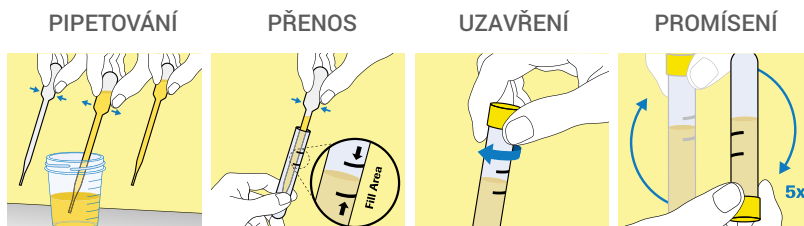


- pipetou přeneste moč z nádobky do zkumavky soupravy *cobas PCR Media*
- moč napipetujte do zkumavky mezi dvě černé rýsky na štítku zkumavky
- zkumavku soupravy *cobas PCR Media* pečlivě uzavřete víčkem
- obsah zkumavky 5x promíchejte otočením dnem vzhůru
- vzorek s vyplněnou žádankou odevzdejte na odběrovém místě nebo u lékaře

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- v době menstruace se odběr moče neprovádí
- pacientky si před odběrem moče nesmí čistit labiální oblast
- vzorek moče lze před přenesením do zkumavky soupravy *cobas PCR Media* uchovat při teplotě 2–30°C po dobu 24 hodin

Klientské centrum

 800 737 383

 podpora@aeskulab.cz

AeskuLab
a Unilabs company